

VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

SMART UND EINFACH

PORTABEL UND ZUVERLÄSSIG



# trackman

Führt Sie zum Erfolg!



TRACKMAN ist Ihr neuer persönlicher Laborassistent und Pipettier-Wegweiser. Er stellt sicher, dass Sie beim Pipettieren von einer Mikrotiterplatte zur anderen immer die Übersicht behalten. Trackman erleichtert Ihre Arbeit, erhöht Ihre Produktivität und hilft Ihnen Pipettierfehler und Crosskontamination zu vermeiden.

## Bestellinformation

Modell:	Bestellnummer
TRACKMAN inkl. Netzteil und 3 Reagentreservoirs (25 mL)	F70301

Optionales Zubehör:	Bestellnummer
Pedal für TRACKMAN	F70261
0.5 mL, 1.5 mL and 2 mL Mikrotuben-Halter (Gefäßkapazität: 16 Mikrotuben)	F70105

[www.gilson.com](http://www.gilson.com) | [sales-de@gilson.com](mailto:sales-de@gilson.com) | [service-de@gilson.com](mailto:service-de@gilson.com) |

**Gilson International Deutschland**

Hoenbergstr. 6 | 65555 | Limburg  
Tel: 06431 / 21215-0 | Fax: 06431 / 21215-40



**ISO9001 Certified**

LT800500. Copyright © 2009. Gilson S.A.S. All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice. All trademarks  
are the property of Gilson Inc. and its subsidiaries.



# trackman™

Führt Sie zum Erfolg!

PERSÖNLICHER LABORASSISTENT

NEU

VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

SMART UND EINFACH

PORTABEL UND ZUVERLÄSSIG



# Vielseitige Funktionalität

*Für ein weites Feld von Anwendungen*

## Wechseln Sie einfach von einer Plattengröße zur anderen



Aufgrund von zwei vorhandenen Plattenpositionen plus fest fixierter Adapter, kann der TRACKMAN sowohl mit 96 als auch 384 Well Mikrotiterplatten benutzt werden, ohne zusätzliches Zubehör.



## Passt sich Ihrer Laborausstattung an

Der Trackman ist mit den meisten handelsüblichen Mikroplatten und Pipettenmodellen sofort einsetzbar - zusätzliche Kosten entfallen.


- Benutzung mit Einkanal- und Mehrkanalpipetten
- Benutzung mit 96 und 384 well Mikrotiterplatten
- Benutzung mit 2.0, 1.5 und 0.5 mL Tubes dank des optionalen Smart-Microtubenhalters (Zubehör)

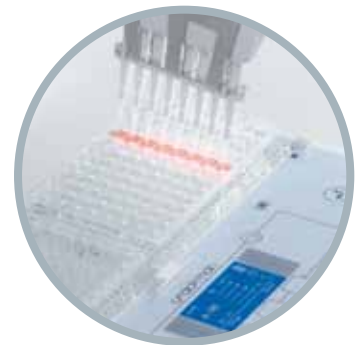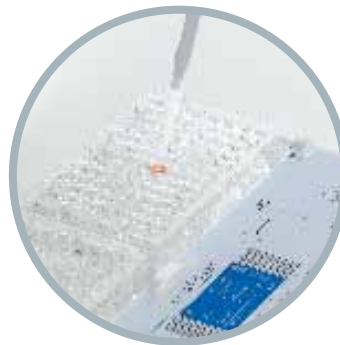

## 16 Programm-Möglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen

verschiedene Pipettiermuster, (individuell entlang der Reihen, Spalten oder andere Konfigurationen), verschiedene Pipettenmodelle und

Gefäßtypen!

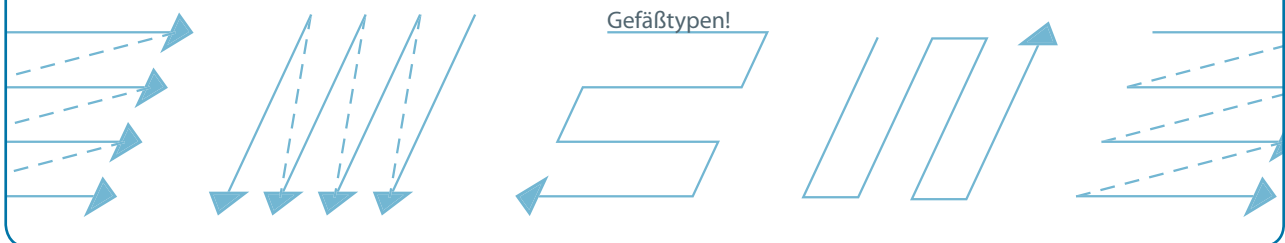

# Smart und einfach

*Erleichtert Ihre tägliche Arbeit!*

## ERLEICHTERT DAS TÄGLICHE PIPETTIEREN

Der Trackman, eine Lichtbox, die den Überblick beim Pipettieren behält, besitzt eine intuitive Software; ein Training ist nicht erforderlich. TRACKMAN hilft Pipettierfehler zu vermeiden und eliminiert Crosskontamination.

## SICHERN SIE IHRE ARBEIT GLEICH VON ANFANG AN

TRACKMAN's LED Lampen helfen Ihnen Ihre 96 und 384 Well Mikrotiterplatten in der korrekten Position auf dem Licht Panel zu platzieren. Fest fixierte Adapter sichern dabei die Plattenpositionierung.

## PASST SICH IHREN BEDÜRFNISSEN AN

Die Timer Funktion des Trackmans macht eine handfreie Bedienung möglich. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Zur optimalen Platzierung auf der Laborbank kann der TRACKMAN entweder in Flachstellung oder leicht geneigt unter Benutzung der ausklappbaren Füßchen positioniert werden.

# Portabel und zuverlässig

*Nehmen Sie den Trackman einfach mit!*

## Immer an Ihrer Seite


TRACKMAN ist ein kleines und sehr leichtes Gerät. Wegen seiner kompakten Größe findet der Trackman auf jedem Labortisch seinen Platz. Langlebige Batterien garantieren eine kabellose Bedienung bis zu 8 Stunden.

## Sicherer Transport

Wenn Sie TRACKMAN unterwegs mitnehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die «Safe Transport» Funktion benutzen. Die Safe Transport Funktion verhindert die Beschädigung von Touch Keys, Keypad und Batterie - so haben Sie noch lange etwas von Ihrem Trackman!

# Nützliches Zubehör für Ihren TRACKMAN

Erweitern Sie die Funktionalität des TRACKMAN mit dem vielseitigen Mikrotuben-Halter um Flüssigkeiten von einem Mikrotube zum anderen zu transferieren. (0.5 mL, 1.5 mL and 2 mL).

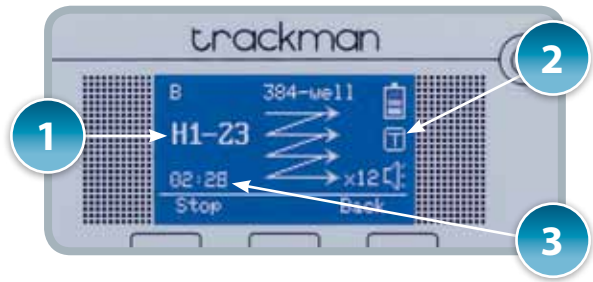

## INTUITIVES SOFTWARE INTERFACE

- 1 Zeigt die Well oder Tube Position an
- 2 Timer mode
- 3 Timer



Genießen Sie die handfreie Bedienung und eine individuelle Geschwindigkeitskontrolle, stellen Sie Ihren Trackman mit dem zusätzlich erhältlichen Fusspedal aus!

