


LABORHITS

Titrierapparat mit Splitterschutz

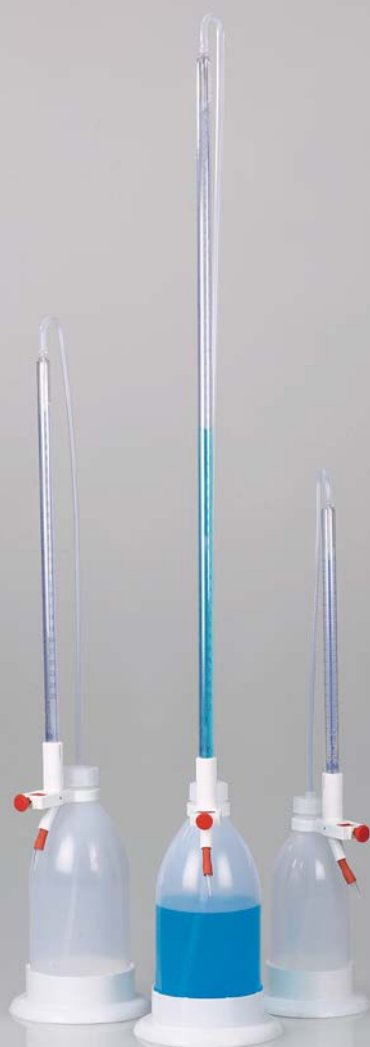

Borosilikatglas 3.3

Mit Splitterschutz

Titrierburette mit Splitterschutz nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Dosierarmatur.

Eine Kunststoffummantelung der Glasburette erhöht die Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Burette einmal zu Bruch geht, ist viel geringer als bei einer herkömmlichen Burette, und sollte dies doch einmal passieren, entstehen keine gefährlichen Splitter.

Die Dosierarmatur ermöglicht eine präzise Dosierung und exakte Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube sowie ein exakter Auslauf über die feine Auslaufspitze.

Eigenschaften

- Mit Splitterschutzummantelung
- Justiert auf Ex
- Bruchsicher, chemikalienbeständig
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Medienberührende Teile: PE, Naturkautschuk, PP, Borosilikatglas

Inhalt ml	Teilung ml	Toleranz ± ml	Höhe mm	VE	Bestell Nr.
15	0,1	0,045	520	1	6.280 403
25	0,1	0,045	650	1	6.280 404
50	0,1	0,075	920	1	6.280 405